

ガラスチップ専用ピペット



SOLVENT-R

ガラスチップ専用ピペット！

※プラスチックチップは、ご使用頂けません。


チップイジェクター機構を追加！！

溶剤・強酸専用（※フッ化水素を除く）

ロック機構付き！（PAT.P）

※グリップを握る事でロックされる機能のため、
ロックボタンを操作する必要はありません。

ETFE（ピストン）、気化排気口（特許取得済）を
導入する事で、耐薬品性に優れたピペットです。
チップイジェクター機構を追加した為、
ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。

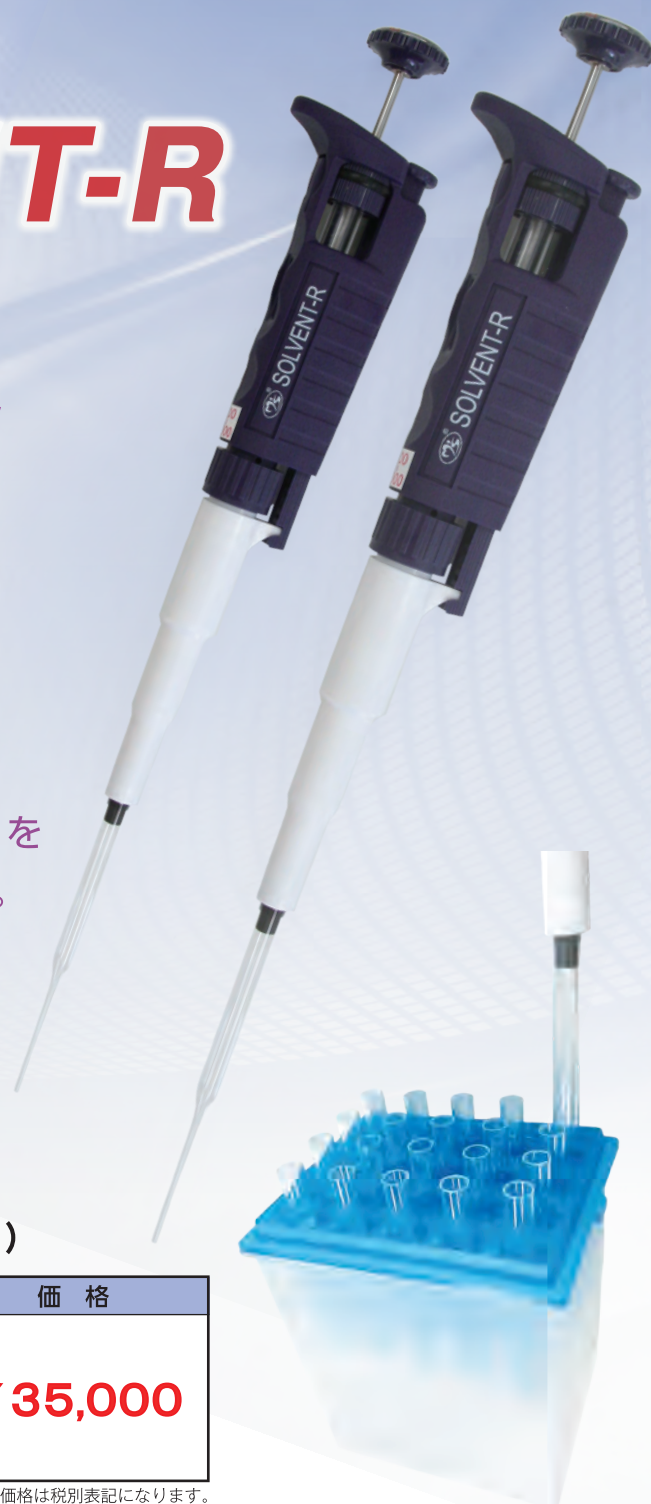

■ ITピペット SOLVENT-R 価格表（1本あたり）

品 番	容 量	精 度	価 格
SOLVENT-R-200	最小10 μ ℓ	±1.5%	¥ 35,000
	最大200 μ ℓ	±0.8%	
SOLVENT-R-1000	最小100 μ ℓ	±3.0%	
	最大1000 μ ℓ	±0.5%	

※価格は税別表記になります。

■ ガラスチップ専用ラック M's G-RACK

品 名	品 番	ガラスチップ	価 格
M's G-RACK ST(200 μ ℓ)	MS-C-ST5001	20 本入り	¥9,200
M's G-RACK LT(1000 μ ℓ)	MS-C-ST5011	20 本入り	¥9,200
M's G-RACK S(200 μ ℓ)	MS-C-ST5000	ラックのみ	¥5,200
M's G-RACK L(1000 μ ℓ)	MS-C-ST5010	ラックのみ	¥5,200

■ 主な材質

主要部	材 質
ピストン	ETFE
Oリング	FKM+ETFEコーティング
ノーズコーン	PP（UV吸収剤入り） FKM-ETFEコーティング

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです

（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っております。）

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

2025.11.1改訂

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町1-1

TEL:(0284)22-3656 FAX:(0284)22-3657

HP: <http://www.it-pipet.jp> E-mail: info-2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】